

CRY-AC

Nestetyppikäyttöiset kryohoitolaitteet



WOIKOSKI
MEDICAL



Kryohoitolaitteet CRY-AC ja CRY-AC-3

Nestetyyppikäyttöiset laitteet ihomuutosten kryohoitoihin

Cry-Ac -laitteita käytetään erilaisten ihomuutosten ja kudosaurioiden hoitoon. Cry-Ac -kryohoitolaitteet tarjoavat turvallista, helposti hallittavaa ja tehokasta hoitokokemusta laitteen laadukkaan rakenteen ja patentoitujen ominaisuuksiensa ansiosta. Toimenpidealueeseen säilyy hyvä näkyvyys, kun pienikokoinen laite ei peitä hoidettavaa aluetta. Sormikäyttöinen painike tarjoaa maksimaalista kontrollia ja käytön helppoutta.

Käsi­käyt­­töinen kryokirurginen hoitolaite

Cry-Ac ihonhoitojärjestelmä käsittää käsi­käyt­­töisen kryokirurgisen hoitolaitteen, jolla nestetyyppiä voidaan annostella hallitusti. Laitteeseen on valittavissa eri käyttötarkoituksiin soveltuvia suuttimia ja kontaktikärkiä. Laitteen mukana tulee aloituspaketti, joka sisältää neljä erikokoista suutinta ja kaksi erilais­ta kontaktikärkeä (T205780).

Cry-Ac ja Cry-Ac-3 -hoitolaitteet on tarkoitettu käytettäväksi saman tuotesarjan lisävarusteiden kanssa.

Nestetyyppikäyttöiset kryohoitolaitteet

TUOTE

Cryo-hoitolaite Cry-Ac 300 ml

Cryo-hoitolaite Cry-Ac 500 ml

TUOTENUMERO

T203630

T203629

Patentoitu, automaattinen venttiili takaa turvallisen käytön pitäen käyttöpaineen koko hoidon aikana vakiona.

Tuote on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja messingistä. Laite ei kylmene polypropeenin kuoren eristäessä kylmyyden laitteen sisälle ja muotoiltu, levenevä jalka on tukeva käytössä. Tuotteet soveltuvat sekä oikea- että vasenkätisille. Kryohoitolaitteita on saatavissa kahta kokoa, 500 ml ja 300 ml.



T203629

T203630

Suuttimet

Suuttimia käytetään ihon pinnalliseen poistamiseen. Valittavana on useita erilaisia suuttimia, jotka on suunniteltu sopimaan erilaisiin käyttötarkoituksiin. Edistynyt akne-aukko sopii erinomaisesti aknelle ja kryokuorinnalle. Suutin antaa pehmeän höyrystetyn suihkeen iholle. Suuttimet A-D sisältyvät jokaiseen Cry-Ac yksikköön. Nämä suutinmallit on tarkoitettu tarkempaan ja kontrolloituun erikokoisten ja -tyyppisten vaurioiden hoitoon. Super Spray E -kärki taas antaa vahvemman, väkevämmän ja virtaviivaisemman suihkeen ja se hoitaa vaurioita nopeammin.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac Edistynyt akne-aukko	T205775
Cry-Ac aukko A (0.04in.)	T205776
Cry-Ac aukko B (0.031in.)	T205777
Cry-Ac aukko C (0.022in.)	T205778
Cry-Ac aukko D (0.016in.)	T205779
Cry-Ac Kärkikipakkaus - 4 aukkoa (A-D), 1in, 20g suora suihku ja 3in, 20 g taipunut suihku	T205780
Cry-Ac Super E-kärki (0,013 tuumaa) takareikällä	T205781

Suihkepidennykset ja adapterit

Suorasuihkua käytetään kondyloomahoitoon.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac alkuperäinen suora suihku	T205782
Cry-Ac 3 tuumaa x 20 g suora suihku	T205783
Cry-Ac 1,0 tuumaa x 16 g suora neula	T205784
Cry-Ac 1,0 tuumaa x 18 g suora ruiskuneula	T205785
Cry-Ac 1,0 tuumaa x 20g suora ruiskuneula	T205786

Taivutetut suihkepidennykset

Taivutettuja suihkeita voidaan kääntää 360 ° tarkkuuden parantamiseksi hoidettaessa vaikeasti saavutettavia vaurioalueita.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac Alkuperäinen taivutettu suihku	T205787
Cry-Ac 3 tuumaa x 20 g taivutettu suihku	T205788
Cry-Ac 1,5 tuumaa x 20 g taivutettu suihku	T205789



T205780



T205775



T205783



T205786



T205782

T205787

Takaosan tuuletusadapteri

Tuuletusadapteri poistaa ajoittaiset suihkut ja lisää typen virtausta. Luer lock sovitinta käytetään kerta-käyttöisten neulojen kiinnittämiseen kryokirurgiseen yksikköön.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac Takaosan tuuletusadapteri Luer lock sovitin	T205790
Cry-Ac Luer lock sovitin muotoillut jatkeet	T205791
Cry-Ac Muotoiltu jatke (3, 6, 9 ja 12 tuumaa)	T205792
Cry-Ac oikea kulma sovitin 90°	T205793
Cry-Ac oikea kulma sovitin 45°	T205794

Kryokammiot

Kryokammioita käytetään jalkapohjasyylien ja tyvisolu- ja okasolusyöpien hoitoon. Kryokammiot mahdollistavat kudoksen syvällisen ja tarkan kirurgisen tuhoamisen. Samalla ne sallivat ajoitetun nestemäisen typen suihkeen kokoamisen. Kryokammioita käytettäessä on suositeltavaa käyttää lisäksi joko suora-kulmaista sovitinta tai muotoiltua jatketta. (T205792 - T205793 - T205794)

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac 6 mm:n kryokammio	T205795
Cry-Ac 10 mm:n kryokammio	T205796
Cry-Ac 15 mm:n kryokammio	T205797
Cry-Ac 18 mm:n kryokammio	T205798

Kylmälevy

Läpinäkyvä lexan-levy, jossa on 4 erikokoista kartio-maista aukkoa (3, 5, 8 ja 10 mm). Aukkojen kanssa käytettävä kryolevy mahdollistaa jäätymisen kohdentamisen paremmin ja suojaa herkkiä alueita, kuten silmiä.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac kylmälevy (3, 5, 8 ja 10 mm)	T205799



T205799



T205790



T205791



T205792



T205793 - T205794



T205795 - T205798

Kryokartiot

6 erikokoista neopreenikartiota, joita käytetään tiivistämään sumutus rajoitetulla alueella. Kartiot ovat erityisen hyödyllisiä epäsäännöllisen muotoisissa vaurioissa, koska ne voidaan muotoilla vaurion mukaan. Koot ovat 6, 11, 16, 25, 30 ja 38 mm.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac kryokartiot Koot ovat 6, 11, 16, 25, 30 ja 38 mm	T205800



T205800

Mini-sondit

Pienikokoisia Mini-sondeja käytetään silmäluomen reunojen, talirauhasen liikakasvun, angiomien, lentiginien, pienten vähäkeratiinisten syylien, trikiaasin ja silmänsairauksien tai ulkokorvakäytävän hoitoon. Sondit mahdollistavat erinomaisen näkyvyyden ja tarkan hallinnan.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac 1 mm:n Mini-sondi	T205801
Cry-Ac 2 mm:n Mini-sondi	T205802
Cry-Ac 3 mm:n Mini-sondi	T205803
Cry-Ac 4 mm:n Mini-sondi	T205804
Cry-Ac 5 mm:n Mini-sondi	T205805
Cry-Ac 6 mm:n Mini-sondi	T205806
Cy-Ac terävä Mini-anturi	T205807



T205801



T205806

Kartiosondit

Kartiosondeja voidaan käyttää suurien vaurioiden tai haavaumien hoitoon.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac Teräväkärkinen kartiomainen sondi	T205808
Cry-Ac 1 mm kartiomainen sondi	T205809
Cry-Ac 2 mm kartiomainen sondi	T205810
Cry-Ac 3 mm kartiomainen sondi	T205811
Cry-Ac 4 mm kartiomainen sondi	T205812
Cry-Ac 5 mm kartiomainen sondi	T205813
Cry-Ac 6 mm kartiomainen sondi	T205814



T205807



T205808

Pallosondit

Pallosondeja voidaan käyttää haavaumakasvaimiin ja suuriin kasvaimiin.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac 6 mm kuulasondi	T205815
Cry-Ac 8 mm kuulasondi	T205816
Cry-Ac 1 cm kuulasondi	T205817
Cry-Ac 2 cm kuulasondi	T205818

Litteät sondit

Litteällä sondilla on pyöristetyt reunat ja se soveltuu hyvin verisuonivaurioihin. Kaikkia litteitä sondeja voidaan painaa verisuonivaurioita vasten jäätymisen syventämiseksi, verenkierron vähentämiseksi ja jäätymisajan lyhentämiseksi.

TUOTE	TUOTENUMERO
Cry-Ac 1 cm litteä sondin	T205819
Cry-Ac 2 cm litteä sondi	T205820
Cry-Ac 2,5 cm litteä sondi	T205821
Cry-Ac 3 cm litteä sondi	T205822
Cry-Ac 8 mm lempeä sondi	T205823

Tarvikkeet

Cry-Ac Eristetty kryokassi	T205824
Cry-Ac tiiviste B-700/800	T205825
Cry-Ac Histologiapaketti	T205826



T205815



T205818



T205820



T205824

Kryokannut

Kannut soveltuvat nestemäisen typen varastointiin ja jakeluun. Kannut ovat kevyitä, helppoja käsitellä ja tyhjiöeristyksen takia kaasujen höyrystyvyys kannuissa on alhainen. Kryokannuja on myös mahdollista vuokrata kauttamme.

TUOTE	TUOTENUMERO
TR11	T200922
TR21	T200923
TR26	T200925
TR35	T200926
TR60	T200928
TR100	T200929
TR-kannun hattu 50 mm	T203448



Kryokannun tyhjennyslaite

Paineistettu tyhjennyslaite nestemäisen typen turvalliseen käsittelyyn.

TUOTE	TUOTENUMERO
Typfikannun tyhjennyslaite DL3	T203447
DL3:n keskitysrengas + tiiviste	T203159
DL3:n varoventtiili	T205095
DL3:n painemittari	T203516
DL3:n faasinerottajan kansi 1"	T204430
DL3:n faasinerottaja	T203449

Rullakot kryokannulle


Lisävaruste suurien kryokannujen liikuttamiseen.

TUOTE	TUOTENUMERO
ACC-ALU-29 TR60 (M)	T205096
ACC-ALU-31 TR60 (NM)	T205097

Nestetyypen turvallinen käsittely



TUOTE	TUOTENUMERO
Suojavisiiri	T202553
Kylmänkestohanskat	T204435

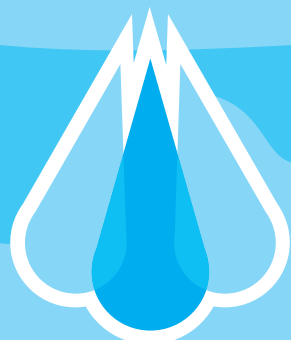

WOIKOSKI
MEDICAL

woikoski.fi

Asiakaspalvelu: medical@woikoski.fi

Tilaukset: tilaukset.medical@woikoski.fi

Puhelin: 040 166 2023, arkisin klo 8-16